

Aesculap® Caiman®

Fortschrittliche bipolare Gefäßversiegelung





Aesculap Surgical Technologies

Aesculap® Caiman®

Caiman bipolare Gefäßversiegelungsinstrumente werden in der offenen und laparoskopischen Chirurgie verwendet. Anwendung finden sie in den chirurgischen Disziplinen der **Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Urologie und Thoraxchirurgie**.

Diese innovativen Instrumente werden beispielsweise in der Hysterektomie, Kolektomie, Gastrektomie und vielen weiteren Indikationen eingesetzt.

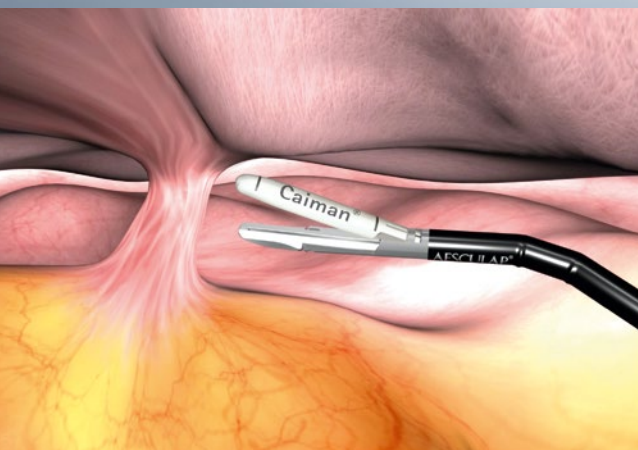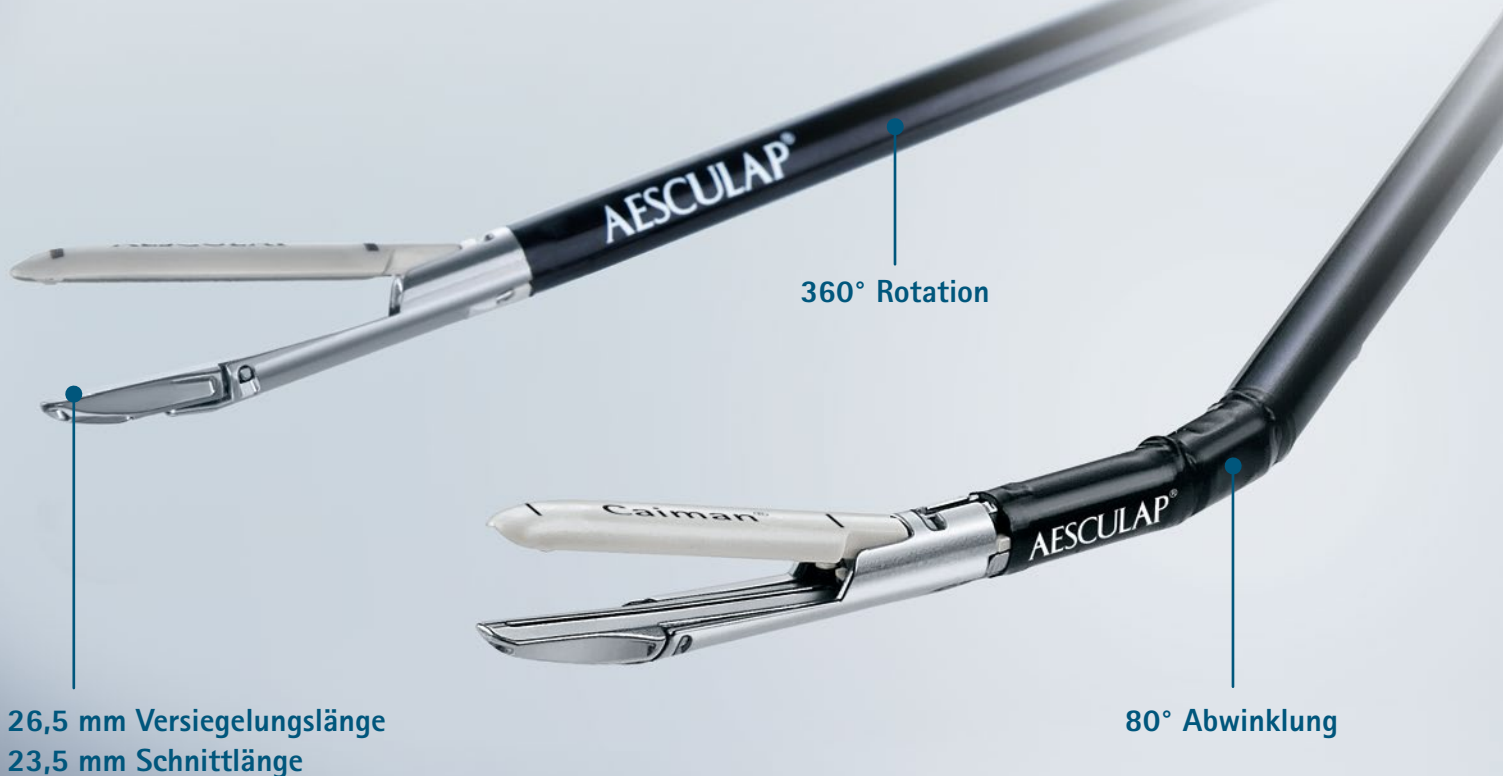

Caiman bipolare Instrumente versiegeln

Gefäße bis zu 7 mm Durchmesser und verfügen über eine mittlere thermische Streuung <1 mm*.

80° Abwinklung

Caiman ist das erste Gefäßversiegelungsinstrument mit einem artikulierbaren distalen Ende. Die Artikulation erweitert die Bewegungsmöglichkeit auch in engen Räumen oder schwierigen anatomischen Verhältnissen.

*Testbericht der Aesculap AG.



Fortschrittliche bipolare Gefäßversiegelung




- **Effektive Gefäßversiegelung**
Hohe Qualität der Gefäßversiegelung bei einmaliger Energie-Aktivierung
- **Gleichmäßige Gewebekompression**
Reproduzierbare hohe Qualität der Gefäßversiegelung
- **Distales Schließen der Instrumentenspitze**
Gleichmäßige Gewebekompression und präzise Gefäßpositionierung
- **Lange Instrumentenspitzen**
Erhöhte Versiegelungslänge und verbesserte chirurgische Effizienz
- **80° Abwinklung**
Vereinfachte Navigation in schwierigen anatomischen Verhältnissen

Lange Instrumentenspitzen

Erhöhte Gefäßversiegelungslänge und verbesserte chirurgische Effizienz.

Gleichmäßige Gewebekompression innerhalb des distalen Instruments ist der Schlüssel zu einer effektiven Gefäßversiegelung. Im Gegensatz zu vergleichbaren Instrumenten ist die Flächenkompression des Caiman stets gleichmäßig. Dies resultiert in einer reproduzierbaren hohen Qualität der Gefäßversiegelung.

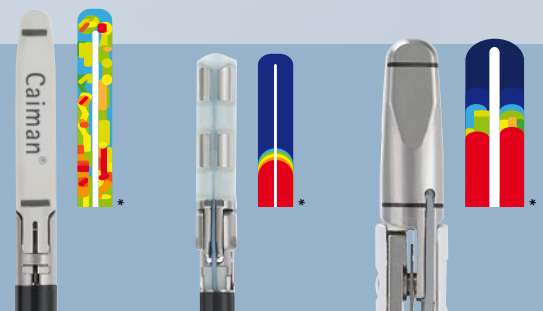

Aesculap Caiman 5
(5 mm)

vergleichbare
Produkte 5 mm


vergleichbare
Produkte 10 mm



*Testbericht der Aesculap AG.


Bestellinformationen

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Schaft Durchmesser	Arbeitslänge	Stück pro Packung
Caiman 5 mm line					
	PL738SU	Caiman 5, nicht abwinkelbare Spitze	5 mm	24 cm	6
	PL740SU	Caiman 5, nicht abwinkelbare Spitze	5 mm	36 cm	6
	PL742SU	Caiman 5, nicht abwinkelbare Spitze	5 mm	44 cm	6
	PL741SU	Caiman 5, abwinkelbare Spitze	5 mm	36 cm	6
Lektrafuse HF-Generator					
	GN200	Lektrafuse HF-Generator (ohne Netzkabel)			
Lektrafuse HF-Generator Zubehör					
	TE780 / TE730	Netzkabel, Schuko-Euro-Stecker, 1,5 m / 5 m			
	TE734	Netzkabel für Großbritannien und Irland, 5 m			
	TE735	Netzkabel für USA, Kanada und Japan, 3,5 m			
	TE676 / TE736	Netzkabel, Kaltgerätestecker, 1 m / 2,5 m			
	GN330	Einheitswagen mit Schiebegriff für elektrochirurgische Einheiten B x H x T: 520 x 900 x 570 mm			
	PV951R	Drahtkorb B x H x T: 370 x 225 x 285 mm			
	GN201	Einzelfuß-Pedal für GN200			

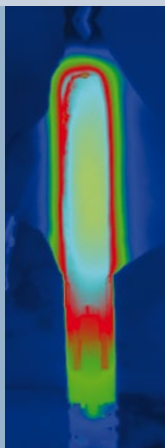

Minimierte Energie


Auch bei mehrmaliger Aktivierung des Instruments, werden die distalen Enden äußerlich nur minimal erwärmt (durchschnittlich 66 °C). Gewebebeschädigungen können so verringert werden.

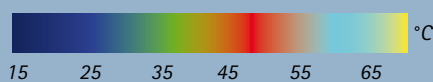

Testbericht der Aesculap AG.



Fortschrittliche bipolare Gefäßversiegelung

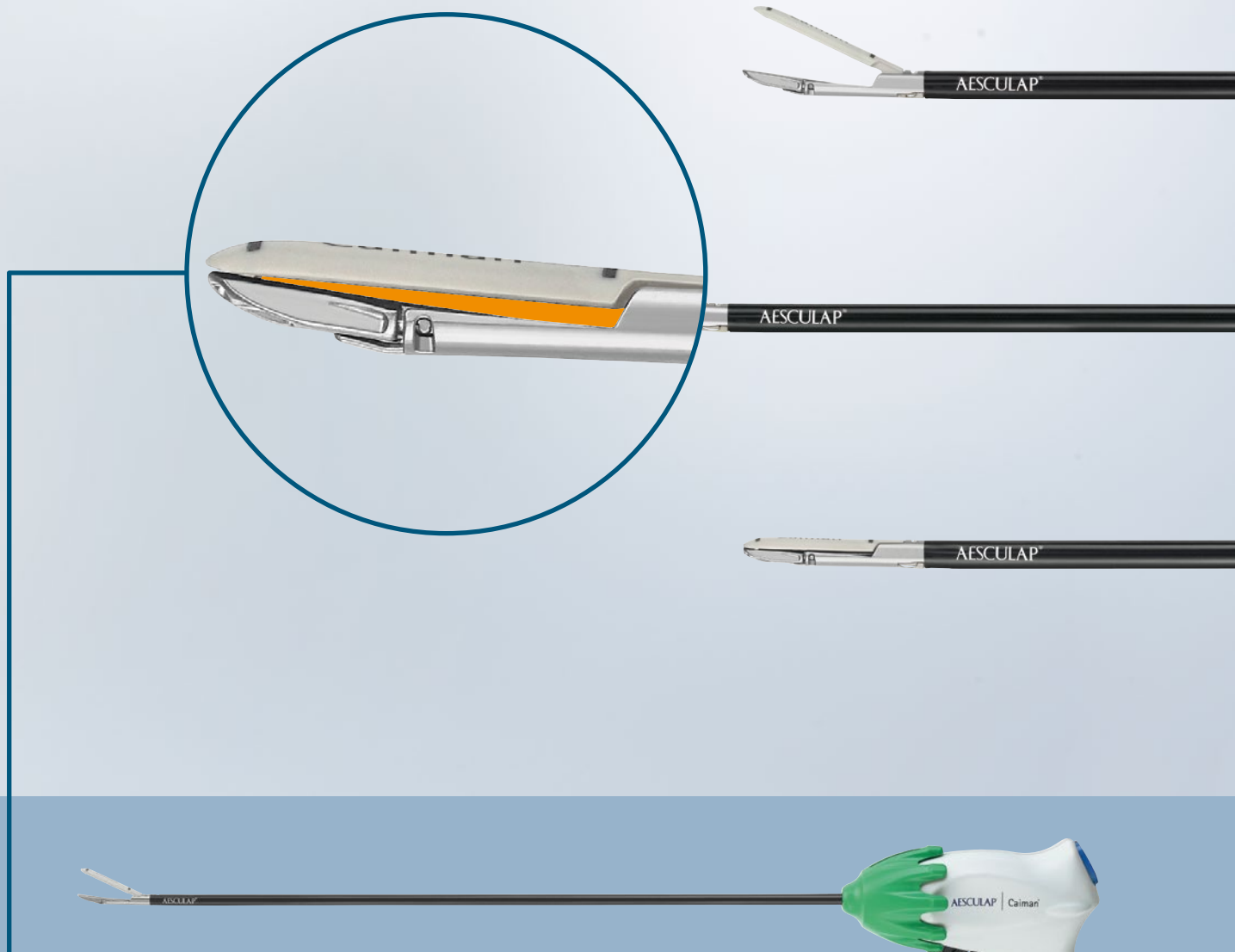

Distales Schließen des Instruments durch patentierte Mechanik

Caiman bipolare Gefäßversiegelungsinstrumente verfügen über eine patentierte distal schließende Wippe. Diese ist der Schlüssel zur gleichmäßigen Gewebekompression und erleichtert das Greifen und Positionieren des Gewebes im Instrument. All diese Merkmale resultieren in einem ausgezeichneten Versiegelungsergebnis.

Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. +43 2236 4 65 41-0 | Fax +43 2236 4 65 41-177 | www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Aesculap Division | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. +41 58 258 50 00 | Fax +41 58 258 60 00 | www.bbraun.ch

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. 07461 95-0 | Fax 07461 95-26 00 | www.aesculap.de

Aesculap – a B. Braun company

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Produktmarke „Caiman“ sind eingetragene Marken der Aesculap AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.