



COMFORT CARE

INFUSOMAT COMPACT ^{plus}

Prevenção do risco em terapia de infusão!

Ambulatory Medical Center

Abril 2023

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Comfort Care

Abril 2023

Infusomat® compact^{plus}

Rigor na Terapia de Infusão!



INÍCIO
RÁPIDO



ALTA
PRECISÃO



BATERIA DE
IÕES DE LÍTIO



POWER SUPPLY
INTEGRADO



PEGA DE
TRANSPORTE
INTEGRADA



DESIGN
ROBUSTO





Clamp Anti Fluxo Livre

O Clamp Anti Fluxo Livre fecha automaticamente a linha para evitar o risco de fluxo livre quando a porta da bomba é aberta.

Infusomat^{plus} Line

O código de cores e os símbolos do sistema facilitam a sua colocação. Os sistemas dedicados garantem uma precisão contínua durante longos períodos (96h).

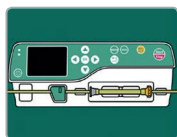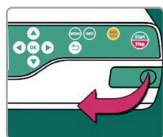

ECRÃ A
CORES



GUIA DE
UTILIZAÇÃO



MANUSEAMENTO
INTUITIVO

TERAPIA DE INFUSÃO

Os alarmes mais comuns em dispositivos de infusão estão relacionados com a entrada de ar no set de administração.¹ As complicações decorrentes da entrada de ar no sistema de infusão podem gerar risco e pressão de tempo tanto para os doentes como para o profissional de saúde, provocando danos no conjunto ou cânula, perda de medicação prescrita e um risco acrescido de infeção devido à desconexão da linha IV. Os conjuntos de administração da B. Braun utilizam a tecnologia SafeSet e impedem a entrada de ar na tubagem, reduzindo os riscos associados e libertando o tempo dos profissionais de saúde para cuidar dos doentes.²



AirStop

Uma membrana hidrofílica aciona o sensor a montante interrompendo a infusão, reduzindo as desconexões ao doente e o risco potencial de infeções.



PrimeStop

Tampa protetora com membrana hidrofóbica impede a fuga de fluidos e otimiza a proteção contra contaminações.

CONSUMÍVEIS




Sistema Infusomat Compact Plus

PVC, AirStop/PrimeStop, filtro de 15 µm, Luer-Lock. 240 cm.

*Mais referências disponíveis
(Caixa: 100 un) Refº 8700200

3,39 €*
3,39 €

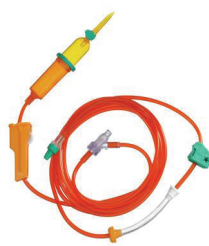

Infusomat® plus Line com proteção UV

PUR, AirStop/PrimeStop, filtro de 15 µm, Luer-Lock. 300 cm.

*Mais referências disponíveis
(Caixa: 100 un) Refº 8700260

5,74 €*
5,74 €

*Preço Unitário

1. Analysis of Infusion Pump Error Logs and there significance for healthcare, British Journal of Nursing, Intravenous Supplement, 2012, Apr 26 – May 9; 21(8)

2. Nurse-patient ratios; a systemic review on the effects of nurse staffing on patients, nurse employee and hospital outcomes; British Journal of Nursing, 2004 Jul-Aug, 37 (7-8) American Academy of Pediatrics. 2003 Aug; 112(2): 431-436.

Comfort Care

Solicite ao seu Distribuidor habitual!

DADOS TÉCNICOS

Infusomat® Compact Plus	Descrição	
Tipo	Bomba de infusão volumétrica	  1.274,05 €*
Dimensão	229 x 98 x 220 mm (W x H x D)	
Peso	1.9 kg	
Proteção contra humidade	IP34 (protegido contra gotas em todas as direções)	
Ecrã	Código de cores matrix ativa 2.4" TF T , 240x320 pixéis, cores 262k, ângulo de visão: total 80°	
Tipo de bateria	Bateria recarregável de iões de lítio. Tempo de funcionamento: aprox. 6h a 25 ml/h Tempo de recarga: aprox. 3h	
Taxa de fluxo	0.1 – 1,200 ml/h	
Rigor da taxa de administração	± 5% após 96 h	
Taxa de Bólus	Taxa de administração 1–1,200 ml/h	
Sistema de infusão	Sistema Infusomat plus	
Biblioteca de fármacos	3,000 fármacos incluindo todos os parâmetros até 30 categorias de fármacos	
Referência	8717050	

*Preço Unitário

Porquê ter menos se pode ter mais?
Respondemos às suas necessidades.

Para mais informações contacte a Equipa da B. Braun através do email:
clientes-ambulatório.pt@bbraun.com

Esta campanha é válida até 30 de abril de 2023 ou até final de stock, e salvo erro tipográfico. Obs.: IVA não incluído. Caso não pretenda receber este tipo de informação, agradecemos que informe a B. Braun através do email indicado.

B. Braun Medical, Unipessoal Lda | Ambulatory Medical Center
Est. Consiglieri Pedroso, 80 | Queluz de Baixo | 2730-053 Barcarena
Tel. 214 368 242 | Fax 214 368 296 | clientes-ambulatorio.pt@bbraun.com | www.bbbraun.pt
Contribuinte nº 501506543 | Cons. Registo Com. Cascais nº 501506543 | abril 2023